


# Ohjeet


## SKIN RENEWAL




Puhdista käsiteltävä ihoalue.

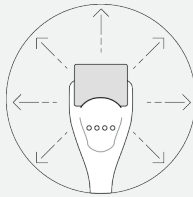


Kuljeta Skin Rolleria edestakaisin liikkein eri muutaman minuutin ajan.

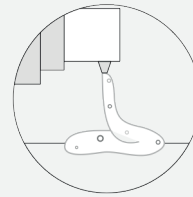


Hiero heti käsittelyn jälkeen ihoon Rejuvenating Serum -seerumia.

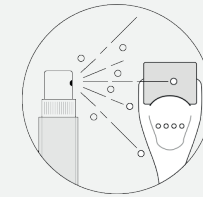

Puhdista Skin Roller aina käytön jälkeen Sanitizing Sprayllamme tai muulla antiseptisellä suihkeella.

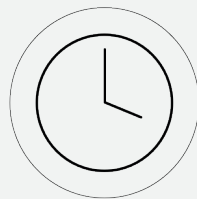

Jos haluat käyttää yövoidetta, suosittelemme, että annat Rejuvenating Serum -geelin imeytyä n. tunnin ajan ennen muiden geelien tai voiteiden levitystä.

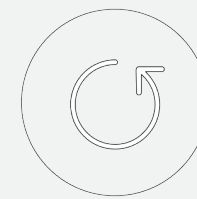

Toista käsittely päivittäin 5–7 päivän ajan ja anna sitten ihon levätä yhtä pitkään. Aloita sen jälkeen hoito uudelleen.