


Ohjeet


SKIN ROLLER




Puhdista käsiteltävä ihoalue.

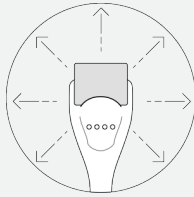


Kuljeta Skin Rolleria edestakaisin
liikkein eri suuntiin muutaman
minuutin ajan.

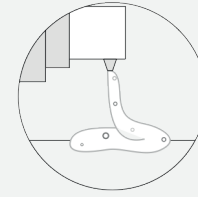

Hiero heti käsittelyn jälkeen ihoon
Rejuvenating Serum -seerumia,
jotta sen vaikuttavat aineet
imeytyvät syvälle ihoon.

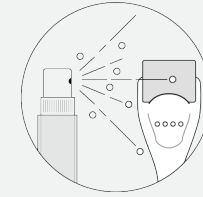

Älä unohda puhdistaa ihorullaa
Sanitizing Sprayllä hoidon jälkeen.

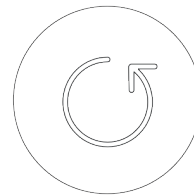

Toista käsittely päivittäin 5–7 päivän ajan ja anna sitten ihon levätä yhtä pitkään.
Aloita sen jälkeen hoito uudelleen.